




**Porter un masque FFP2, des gants et des lunettes de protection
pour réaliser le prélèvement**

Le Kit fourni par l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie contient :

- **1 sac** avec une « poche » externe pour la feuille réseau
- **1 fiche de renseignement clinique**
- **2 écouvillons** à tige plastique + **1 milieu de transport** virus à conserver à T° ambiante (entre 18°C et 25°C)

1- Prélèvement nasal et pharyngé :

- Faire moucher le patient pour éliminer l'excès de sécrétions.
- Maintenir la tête du patient légèrement inclinée en arrière.
- Insérer le **1^{er} écouvillon dans la narine**, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais.
- Réaliser délicatement des mouvements rotatifs pendant 15 secondes en grattant les parois afin de recueillir des cellules.
- Avec le **2^{ème} écouvillon** plastique frotter successivement le **pilier des amygdales**.

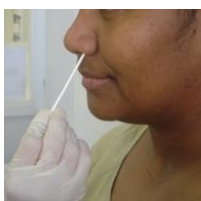

2- Décharger les 2 écouvillons en plastique dans le milieu de transport :

- Introduire successivement les écouvillons en les frottant contre les parois du tube pour détacher les cellules.
- Retirer l'écouvillon à environ 1 cm du fond du récipient et casser la tige.
- Fermer le bouchon.
- Etiqueter ou **identifier** au nom du patient le milieu de transport.
- Remplir obligatoirement la fiche de recueil de renseignements cliniques destinée au laboratoire et à l'OMS.



3- Transfert vers l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie :

- Transfert **rapide** vers le laboratoire par vos circuits habituels dans une glacière.
- Si impossibilité de transfert rapide, conserver les prélèvements dans un congélateur ou à + 4°C à défaut.